




DR.FISKUS
INNOVATIONS

מדריך למשתמש – מנקה אולטרסוני



- קרא את כל ההוראות לפני השימוש
- שמור מדריך זה

1. ציור המוצר ותיאוריו

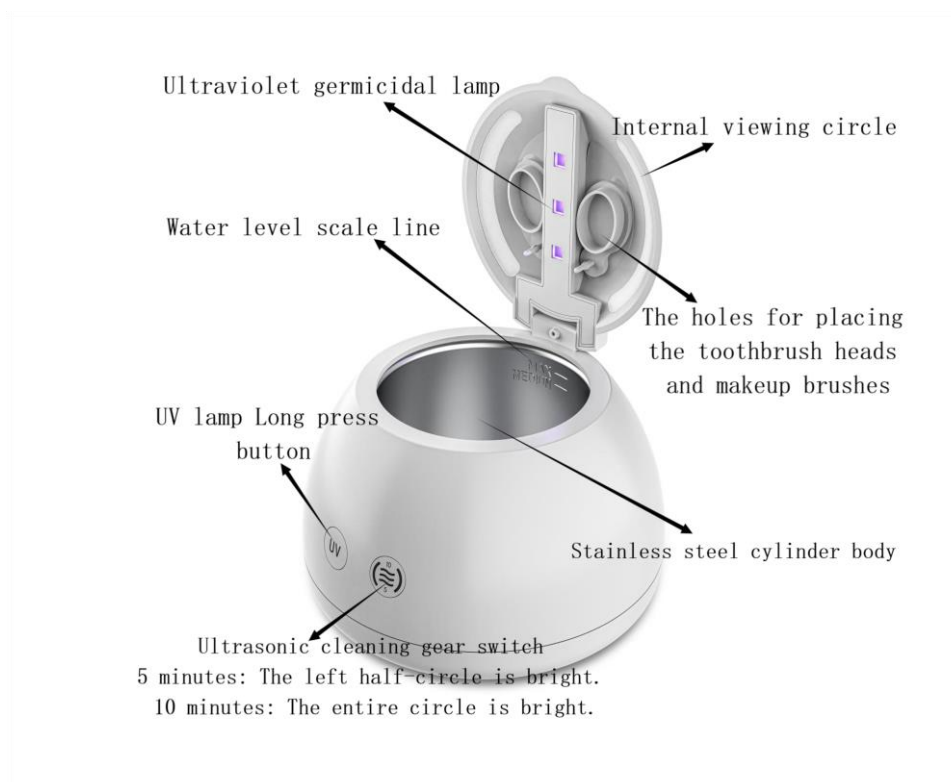


מפרטים

שם המוצר	מנקה אולטראסוניק	כניסה	Hz50/60-V240-AC110
הספק	W±2W28	ספק כוח	A1.5-DC24V
גודל	110×130×130 מ"מ	נפח מיכל	250 מ"ל
גודל מיכל	55×Φ82 מ"מ	בחירת טיימר	5 דקות, 10 דקות

II. הוראות בטיחות חשובות

1. אין לפרק את המכשיר אלא על ידי טכנאי מורשה.
2. נתק את המכשיר מהחשמל לפני המילוי. אל תחרוג מסימן "MAX".
3. אל תיגע בשקע בידיים רטובות כדי להימנע מהתחשמלות.
4. אל תטבול את המכשיר במים כדי להימנע מהתחשמלות.
5. אל תשתמש במכשיר זה בזמן שינה או ישנוניות.
6. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו, או אנשים בעלי כישורים מתאימים כדי למנוע סכנה.
7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה מאדם האחראי לבטיחותם.
8. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.


III. עיקרון סילוק הכלוך

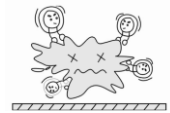

גלי אולטרסאונד מתפשטים אל תוך המים ויוצרים קוויטציה ואמולסיפיקציה עדינה.



מיליוני בועות קוויטציה קטנות נוצרות בכל שנייה. הבועות נוצרות ומתפוצצות ברציפות תחת גל שחרור מכני בתדר גבוה.

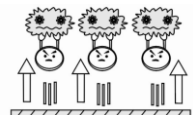

הפגיעה החזקה וזרם הניקה השלילי מפרקים את הלכלוך לגרגירים קטנים ומפרידים אותם מפני החפץ. הגרגירים עוברים אל תוך המים.

IV. יישום

הערה:

9. לאחר הפעלה רציפה במשך מספר מחזורי ניקוי, המכשיר יפעיל אוטומטית הגנת יתר חום ויכבה. הגנת יתר חום: □ אם תחליף את המים במיכל במים קרים, הניקוי יימשך; □ אם לא תחליף מים קרים, תן למכשיר לנוח כ-15 דקות, ואז הוא יוכל לעבוד שוב.
10. לא מומלץ לכבות את המכשיר במהלך הניקוי.
11. אם המכשיר מופעל ללא מים, הוא יפעיל אוטומטית הגנת "ללא מים". הוא יעבוד 5 שניות ואז יכבה אוטומטית. פשוט מלא נזל למיכל והפעל את המכשיר – הניקוי יתחיל.

V. הוראות הפעלה

12. פתח את המכסה ומלא את מיכל הנירוסטה במים/נוזל.
13. אם המכשיר מופעל ללא מים, הוא יפעיל אוטומטית הגנת "ללא מים" – יעבוד 5 שניות ואז יכבה. (מלא מים והפעל מחדש – הניקוי יתחיל).
14. הכנס את החפץ המלוכלך למיכל וודא שהוא מכוסה היטב במים. אל תחרוג מסימן "MAX".
15. סגור את המכסה וחבר לחשמל.
16. לחץ על כפתור האולטרסאונד (כ-2-4 שניות) עד שהמכשיר מתחיל לפעול. לחיצה אחת = מצב ניקוי של 5 דקות.
17. לניקוי עמוק, לחץ שוב על כפתור האולטרסאונד – המכשיר יעבוד במצב ניקוי של 10 דקות.
18. במהלך הניקוי, לחיצה ממושכת על הכפתור תעצור את הניקוי.
19. לחץ לחיצה ממושכת על כפתור UV – מנורת הסטריליזציה באולטרה-סגול שבמכסה תופעל. (מומלץ להפעיל סטריליזציה UV כאשר האולטרסאונד כבוי והמיכל ריק ממים). זמן הסטריליזציה הוא 15 דקות – תכבה אוטומטית.
20. אם תלחץ שוב על כפתור UV במהלך הסטריליזציה – המנורה תכבה.
21. בסיום הניקוי האולטרסוני או הסטריליזציה באולטרה-סגול, שלוף את תקע החשמל.

VI. פריטים שניתן לנקות

פריטים ספציפיים	סוג
ריטיינר, אליינר, מגן שיניים, תותבת, Invisalign שקוף, כלי שיניים קטנים אחרים	פריטי שיניים
טבעות, שרשראות, עגילים, צמידים וכד'	תכשיטים
ראש מברשת שיניים, להב גילוח וכד'	פריטי יומיום
פטמות, מוצצים, כלי אכילה לתינוקות	פריטי תינוקות

Dr. Fiskus Innovations

DR.FISKUS
I N N O V A T I O N S